

BLIMO

Bärbar och hopfällbar elektrisk rullstol



www.blimo.se




www.blimo.dk



www.blimo.no



www.blimo.fi

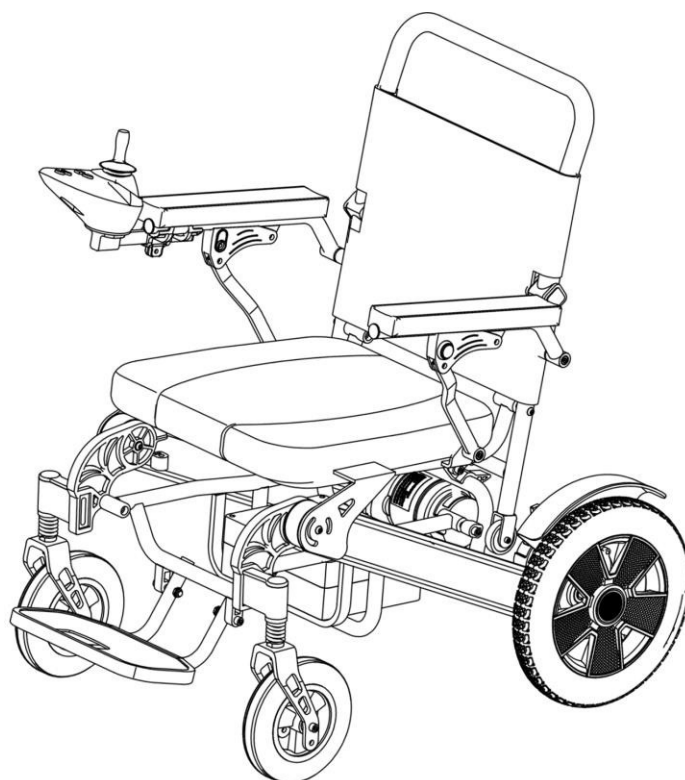

Bruksanvisning



Innan du använder den elektriska rullstolen BLIMO Move-serien, läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk.



© Nordbutiker AB

Tack för att du valde denna elektriska rullstol

- Move från **BLIMO**

Vårt mål är att du ska fortsätta att vara nöjd med ditt val av både leverantör och produkt. Din elektriska rullstol är utformad för att ge högsta möjliga bekvämlighet och säkerhet samtidigt som den uppfyller miljökraven.

Bruksanvisningen är främst avsedd att göra dig bekant med elrullstolens funktioner och egenskaper och hur du använder dem på bästa sätt. Den innehåller också viktig information om säkerhet och underhåll samt beskriver möjliga problem som kan uppstå vid användning av elrullstolen.

Innan du börjar använda din elektriska rullstol är det viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning, särskilt säkerhetsanvisningarna. Förvara alltid bruksanvisningen inom räckhåll när du använder produkten, eftersom du kan behöva viktig information om användning, säkerhet och underhåll.

All information, alla bilder, illustrationer och specifikationer baseras på den produktinformation som var tillgänglig när denna bruksanvisning trycktes. Bilder och illustrationer som används i denna bruksanvisning är representativa exempel och är inte avsedda att vara exakta avbildningar av de olika delarna av den elektriska rullstolen.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produkten utan föregående meddelande.

Om du har några frågor, vänligen kontakta återförsäljaren där du köpte rullstolen. Om du vill veta mer om oss och vårt sortiment av hjälpmedel för rörlighet och boende är du välkommen att besöka www.blimo.se / www.blimo.dk / www.blimo.no / www.blimo.fi



www.blimo.se



www.blimo.dk



www.blimo.no



www.blimo.fi

Index

1. Allmänt	1
1.1 Om bruksanvisningen	1
1.2 Avsedd användning	1
1.3 Symboler	1
2. Säkerhetsanvisningar	1
3. Packlista för standard elektrisk rullstol	2
4. Lär känna din rullstol	2
4.1 Översikt	2
4.2 Tekniska specifikationer	4
4.3 Elanslutningsschema	5
5. Förberedelser inför användning	6
5.1 Säkerhetsanvisningar och säkerhetsrutiner	6
5.2 Fälla ut eller fälla ihop den elektriska rullstolen	9
5.3 Uppfällbart armstöd	10
5.4 Uppfällbart fotstöd	11
5.5 Montera och justera tippskyddet	11
5.6 Installation av styrenhet och dess fällbara stöd	12
5.7 Anslutning av kablar	12
5.8 Börja köra	12
5.9 Litiumbatteri, laddare och laddning	13
5.10 Övriga introduktioner	15
6. Styrenhet	17
6.1 Styrenhet (SY-D)	17
7. Transport och förvaring av rullstolen	18
7.1 Transport och förvaring av rullstolen	18
7.2 Lufttransport	18
8. Underhåll och reparationer	18
8.1 Frekvens för underhåll och inspektion	19
8.2 Verktygsväska	19
8.3 Rengöring	19
9. Felsökning	20
9.1 Felsökningsguide	20
9.2 Felsökningsguide för styrenhet (SY-D)	20
10. Begränsad garanti	22
12. Symbolernas betydelse	23

1. Allmänt

1.1 Om bruksanvisningen

Producerad och publicerad av BLIMO
Versionsnummer: 1.0
Datum: 2024-10-29

Språk: SE
Gäller: Move-serien

1.2 Avsedd användning

Den elektriska rullstolen är en stol utrustad med hjul och är ett transportmedel för funktionshindrade, sjuka och rörelsehindrade.

1.3 Symboler

Följande symboler som beskriver fara, varning, försiktighet, anmärkning och information används i denna handbok för att uppmärksamma punkter som är av stor betydelse för säkerheten.

Symbol	Namn	Beskrivning
	FARA	Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall samt allvarliga skador på produkten eller annan egendom.
	VARNING	Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till allvarliga skador samt skador på produkten eller annan egendom.
	VARNING	Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga skador samt skador på produkten eller annan egendom.
	OBS	Indikerar en viktig men inte farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till skador på produkten eller annan egendom.
	INFORMATION	Ger användbara tips, rekommendationer och information för effektiv och problemfri användning.

2. Säkerhetsanvisningar

Läs och följ alla instruktioner och varningar i alla manualer som medföljer din elektriska rullstol och dess tillbehör. Felaktig användning kan både skada användaren och rullstolen. För att minska dessa risker, läs bruksanvisningen, särskilt säkerhetsinstruktionerna och varningstexterna.

BLIMO ansvarar inte för personskador eller egendomsskador som uppstår till följd av att någon inte följer varningarna och instruktionerna i denna manual. BLIMO ansvarar inte för skador eller skador som uppstår till följd av bristande omdöme.

Det är också av yttersta vikt att du ägnar tillräckligt med tid åt att bekanta dig med de olika knapparna, funktionerna och styrreglagen etc. på din rullstol och dess tillbehör innan du börjar använda den.

Gör inte din första provkörning utan att först se till att det finns hjälp i närheten om du skulle behöva det.

3. Packlista för standard elektrisk rullstol



MOVE

Bilden som visas här är endast vägledande. Om det finns skillnader mellan bilden och den faktiska produkten, gäller den faktiska produkten.

 Operator's Manual Bruksanvisning	 Armstödspåse * 2 st	Laddare	
		Kontroller (måste köpas separat)	
		Stötskydd	
Litiumbatteri 24V12Ah (standard) Litiumbatteri 24V20Ah (tillval) Litiumbatteri 24V26Ah (tillval)			

4. Lär känna din rullstol

4.1 Översikt






Kod	Namn på huvudkomponenter	Kod	Namn på huvudkomponenter
1	Styrenhet	8	Ryggstöd
2	Sittdyna	9	Armstöd
3	Etikettens placering	10	Styrenhetsdrivrutin
4	Batteri	11	Mudapron
5	Fotstöd	12	Rullstolsram
6	Hjullager	13	Stötsäkerhetsanordning
7	Lyftgrepp	14	Drivhjul och motor
Egenskaper			
Move-serien är elektriska rullstolar med bakhjulsdrift för körning utomhus och inomhus. Den har en 4-länkskonstruktion och kan fällas ihop eller fällas ut på 1 sekund. Dess låga vikt och kompakta storlek gör den mycket lämplig som transportmedel för utomhusbruk.			

4.2 Tekniska specifikationer

4.2.1 Mått (Obs: Manuell mätning med liten felmarginal, beroende på det verkliga objektet)

	Move
Sitsbredd:	450 mm
Sittdjup:	430 mm
Sitsramens höjd vid framkanten:	435 mm
Sitsytans höjd vid framkant:	500 mm
Ryggstöds bredd:	440 mm
Ryggstöds höjd:	500–600 mm
Avstånd mellan armstöd:	455 mm
Armstöd till sits:	210 mm
Fotstöd till sits:	320 mm
Markfrigång:	110 mm
Hjulbas:	550 mm
Förpackningsstorlek:	670 x 470 x 845 mm

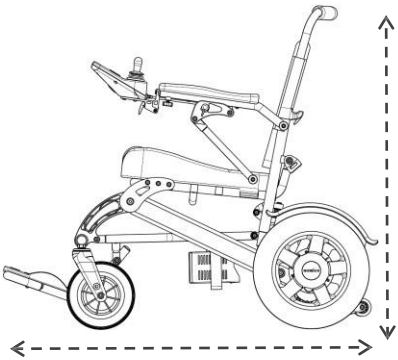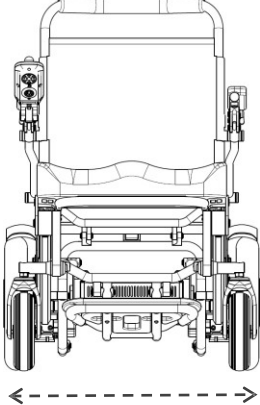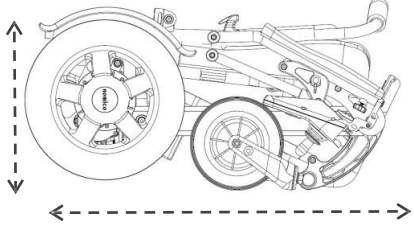Flytta		
 Ryggstöds höjd justerbar		
Längd: 950/1190 mm Höjd: 960 – 1060 mm	Bredd: 620 mm	Förvaringsstorlek Längd * Bredd * Höjd: 620 * 400 * 770 / 810 mm

4.2.2 Prestanda

	Förflyttning
Max. viktkapacitet:	120 kg
Max. hastighet:	6,0 km/h
Maximal körsträcka:	10 Ah: 14 km
	20 Ah: 23 km
	26 Ah: 30 km
Max. lutningsförmåga:	12
Horisontellt bromssträcka:	≤ 1,5 m
Vändradie:	170 cm

4.2.3 Elektriska komponenter

	Rörelse
Borstad motor:	250 W*2, DC24V
Litiumbatteri (tillval):	24 V 12 Ah/20 Ah/26 Ah
Laddningstid för batteri:	6–8 timmar
Borstad styrenhet:	SYD 24V
Automatisk broms:	Elektromagnetisk broms
Laddare DC-utgång:	24V2A
Laddare AC-ingång:	100–240 V, 50/60 Hz

4.2.4 Ram och hjul


	Flytta
Ramens material:	Aluminiumlegering
Hjul:	8 tum
Drivhjul:	12 tum Luftfyllt däck (Däcktryck max. 2,5 bar)
Anti-tip-anordning hjul:	2 tum

4.2.5 Vikt

	Flytta
Rullstolens nettovikt: (utan batteri)	26 kg
Nettovikt för litiumbatteri 12 Ah:	3 kg/st
Nettovikt för litiumbatteri 20 Ah:	4 kg/st
Nettovikt för litiumbatteri 26Ah:	4,2 kg/st

4.3 Elektrisk anslutningsschema

Kod	Namn på huvudkomponenter	Kod	Namn på huvudkomponenter
A	Styrenhetsdrivrutin		
①	Anslut till vänster motor	③	Anslut till litiumbatteri
②	Anslut till styrenheten	④	Anslut till höger motor

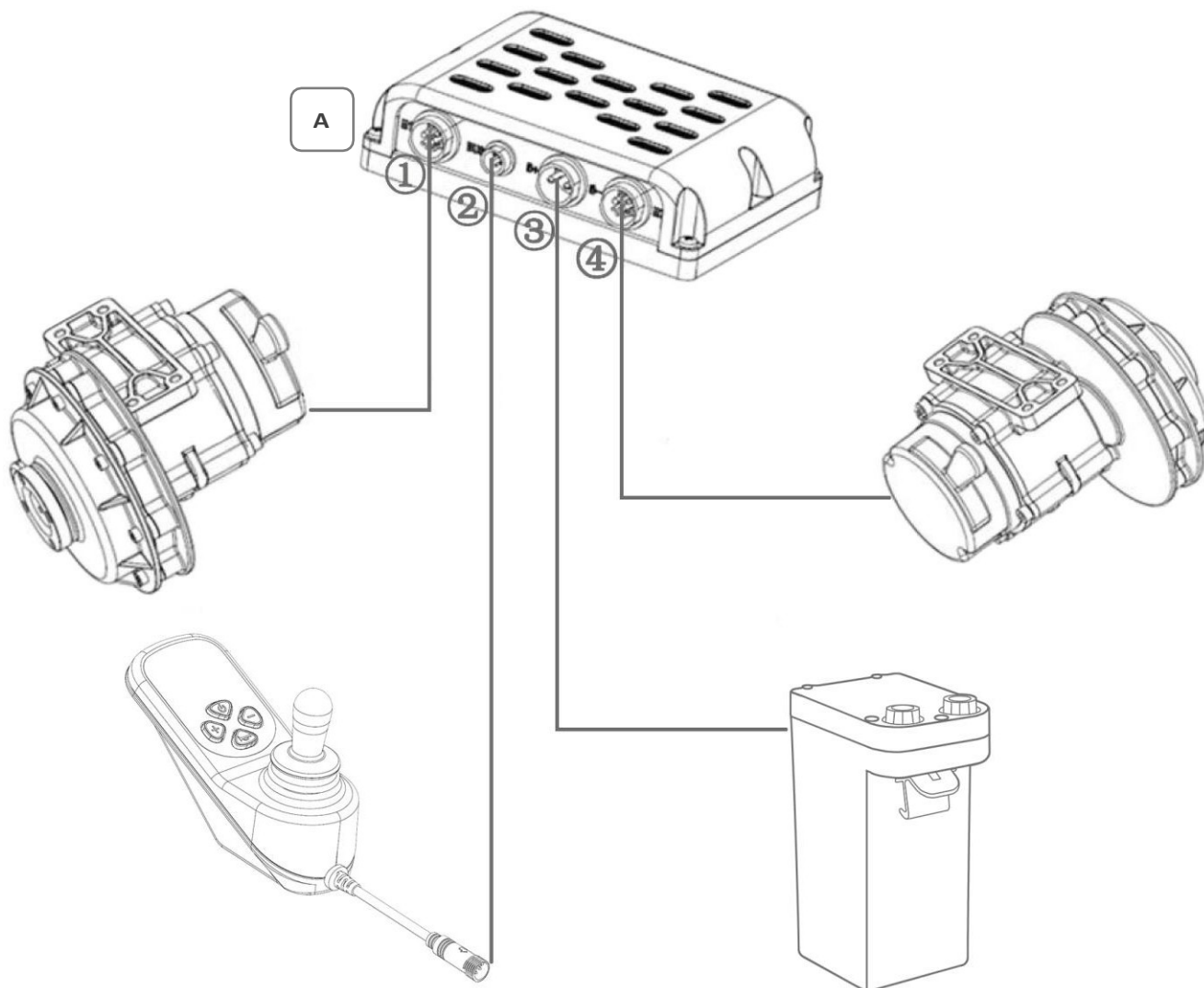


5. Förberedelser inför användning

Rullstolen är avsedd för användning både inomhus och utomhus. Vid körning inomhus ska du vara försiktig i trånga passager, när du passerar genom dörrar och ingångar och när du använder hissar, ramper etc.

När du kör utomhus, kom ihåg att köra mycket långsamt i branta backar och var mycket försiktig när du kör på ojämna underlag, i uppførsbackar, i sidolut och över hinder. Håll alltid ett gott säkerhetsavstånd när du kör nära kanter och stup.


Vi rekommenderar användarna att göra upprepade provkörningar i miljöer där de känner sig trygga för att bekanta sig med hur rullstolen och dess tillbehör beter sig i olika situationer innan de börjar använda rullstolen på allmänna vägar och i andra offentliga utrymmen.

5.1 Säkerhetsanvisningar och övning

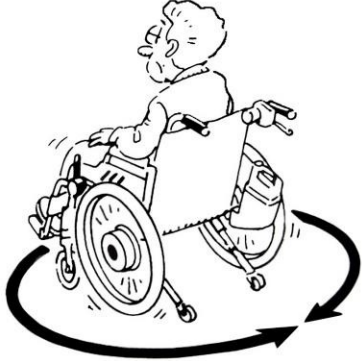
		
❗ Läs denna bruksanvisning tills du fullständigt förstår och lär dig funktionerna och egenskaperna hos den elektriska rullstolen. Öva tills du har tillräcklig förmåga för att kunna använda den.	❗ Användaren måste åtföljas av en vårdare när hen kör rullstolen för första gången.	❗ Tryck lätt på joysticken framåt för att köra. Släpp joysticken för att stanna.
		
❗ tryck lätt på joysticken bakåt för att flytta; Släpp joysticken för att stanna.	❗ Tryck lätt på joysticken för att svänga åt vänster eller höger. Släpp joysticken för att stanna.	❗ Tryck lätt på joysticken för att öva på att undvika hinder och öva på hastighet på lämpligt sätt.
		
❗ Tryck lätt på joysticken i kurvans riktning och öva på att anpassa hastigheten i enlighet med detta.	⚠ Trottoarkant bör inte vara högre än 40 mm vid normal körning, och måste korsas långsamt.	⚠ Snabb körning: Tryck lätt på joysticken rakt framåt och fortsätt att köra rakt fram. Var vid detta tillfälle vaksam och undvik kollisioner.



⚠ När du kör uppför lutas kroppen framåt för att hålla tyngdpunkten, medan du kör nedför, luta dig inte framåt. Uppför och nedför måste köras långsamt, Lutningen bör vara mindre än 12°.

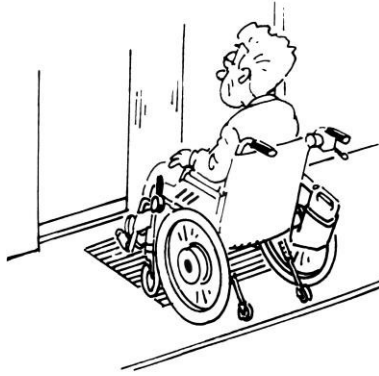

⚠ Föraren ska vara uppmärksam på hissdörrens öppnings- och stängningsintervall för att undvika kollisioner vid på- och avstigning.

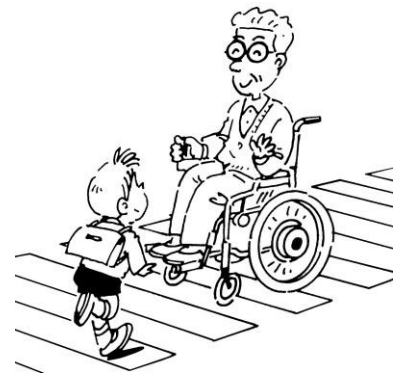


⚠ Operatören ska korsa vägen eller gatan på övergångsstället och vara uppmärksam på trappsteg, fotgängare och trafik.




⚠ När föraren kör utomhus ska han eller hon köra på trottoaren och inte köra in på bilkörbanan.




⚠ Föraren måste åtföljas av en vårdare när han/hon går upp eller eller högre trappor.

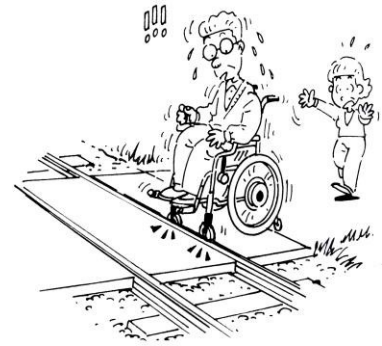


⚠ Föraren måste åtföljas av en vårdare när han/hon korsar järnvägen.

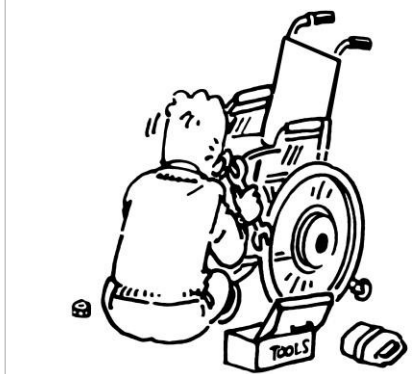

ⓘ Det är förbjudet för användare att reparera utan tillstånd, och reparationen måste utföras av en professionell verkstad eller underhåll service personal.

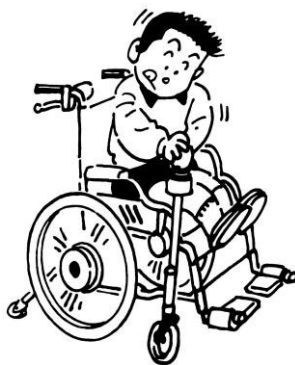

⚠ Barn får inte leka med denna elektriska rullstol.

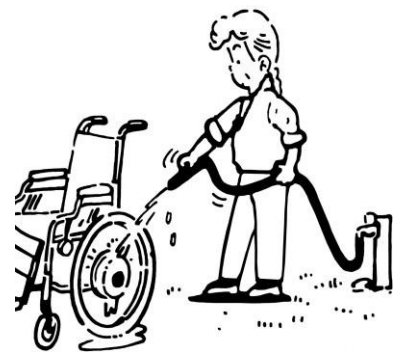

⚠ Det är förbjudet att skölja denna elektriska rullstol direkt med vatten. Använd en torr eller fuktig trasa för rengöring. Det är förbjudet att använda frätande vätskor.

		
⚠ Batteriet måste hållas borta från regn och fukt. Det ska förvaras på en sval och ventilerad plats.	⚠ Barn får inte leka med batteriet, det måste förvaras på en plats där barn inte kan komma åt det.	⚠ Batteriet ska placeras på en sval, torr och väl ventilerad plats under laddning eller förvaring. Batteriet måste hållas borta från eld och värme och undvik direkt solljus.

5.2 Fäll ut eller fäll ihop den elektriska

rullstolen Ta ut rullstolen ur kartongen.

	OBS Innan du packar upp, kontrollera om kartongen är skadad och kontakta omedelbart din återförsäljare om det finns några skador. Om du köper online är det ännu viktigare att noggrant kontrollera om kartongen är skadad under logistik och transport.
--	---

5.2.1 Fäll ut den elektriska rullstolen

Det första sättet att fälla ut rullstolen		
		
Ställ dig bakom rullstolen, greppa handtaget med händerna, luta rullstolen långsamt framåt och lyft den uppåt samtidigt.	Fortsätt att lyfta den tills du hör ett klickljud när fjäderstiftet i mitten sätts in i fästhållet.	Rullstolen kan enkelt fällas ut.
Det andra sättet att fälla ut rullstolen		

		
Ställ dig på sidan av rullstolen, håll i handtaget med ena handen och tryck samtidigt ner sätet med den andra handen.	Fortsätt att trycka sätet nedåt tills du hör ett klickljud när fjäderstiftet i mitten sätts in i fästhållet.	Rullstolen kan enkelt fällas ut.

	VARNING Operatören måste kontrollera och bekräfta att låset i mitten är låst efter att rullstolen har fällts ut, annars kan det leda till allvarliga skador samt skador på rullstolen eller annan egendom.	
---	--	---

5.2.2 Fälla ihop elrullstolen

		
Ställ dig på sidan av rullstolen, tryck på låsplattan med ena handen och tryck handtaget mot sätet med den andra handen.	Fortsätt att stå på ena sidan av rullstolen, håll i handtaget med ena handen, greppa framsidan av sätesramen med den andra handen och dra den mot ryggstödet tills rullstolen är helt hopfälld.	

5.3 Uppfällbart armstöd

		
Vänd på vridknappen moturs för att låsa upp armstödet.	Dra armstödet för att fälla upp det bakåt.	Tryck knappenarmstödet stöd nedåt för att sätta in det.

5.4 Uppfällbart fotstöd

	
	VARNING Använd inte fotplattorna som stöd när du sätter dig i eller reser dig ur rullstolen. Fotplattorna är inte konstruerade för att bära belastning. Överdriven kraft kan leda till personskador eller skador på egendom, inklusive skador på rullstolen.

5.5 Montera och justera tippskyddet

		
Dra ut spärren ur röret på tippskyddet.	Sätt i hjulramen och rikta in hålen på rören på tippskyddet så att de är i linje med hjulram.	2 lägen för justering. Installationsmetoden är densamma för vänster och höger.



VARNING

Lämna tippskyddet monterat för att minska risken för tippning. Var alltid medveten om sätets position och hur det kan påverka rullstolens stabilitet på olika underlag även med tippskydd (särskilt i sluttningar).

5.6 Installation och justering av kontrollenheten



För in den i armstödet rör och lås.




Släpp lås och justera framåt eller bakåt.



VARNING

Använd aldrig kontrollenheten som handtag eller stöd, den är inte konstruerad för att bära belastning. Överdriven kraft kan leda till personskador eller materiella skador, inklusive skador på rullstolen.

5.7 Anslutning av kablar

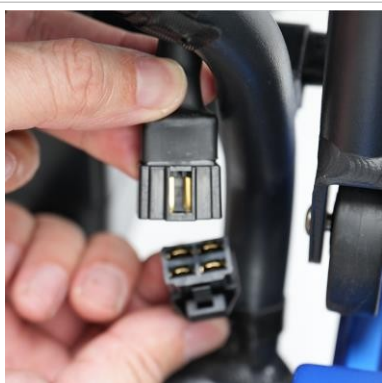

Anslut vänster och höger motor till styrenheten



Anslut batteriet till styrenheten

5.8 Börja köra

Kontrollera att styrenheten är korrekt monterad och att joysticken är i utgångsläget. Se till att alla strömkablar är anslutna. Snabba svängar och körning på ojämna underlag kan påverka din förmåga att hantera rullstolen på ett säkert sätt.

5.8.1 Växla till körläge

**OBS**

För en specifik beskrivning av gränssnittet, se ”6. Styrenhet”.

1. Ställ in rullstolen i köräge med hjälp av handtagsspakarna (se bilden till höger).
2. Slå på strömmen med strömbrytaren på kontrollpanelen.
3. Flytta joysticken försiktigt framåt för att köra framåt eller bakåt för att backa.
4. Justera hastigheten med knapparna för att minska och öka maxhastigheten. Rullstolens elektronik gör det möjligt att köra mycket långsamt över hinder. Kör fram till hindret och kör sedan försiktigt över det.

**WARNING: Placera fötterna korrekt**

Se alltid till att dina fötter är korrekt och säkert placerade på fotplattorna innan du använder rullstolen. Använd fotremmar om det behövs. Om du inte gör det ökar risken för personskador.

**WARNING**

Gör inte den första provkörningen ensam. Provkörningen syftar till att fastställa hur du och rullstolen fungerar tillsammans och du kan behöva hjälp.

**WARNING**

Var mycket försiktig när du kör på sluttningar med ojämn yta (t.ex. gräs, grus, sand och snö).


**WARNING**

Om rullstolen rör sig på ett sätt som du inte vill, **släpp joysticken omedelbart!** Detta gör alltid att rullstolen slutar med det den håller på med.

5.8.2 Joystickfel vid start

Rör inte joysticken före, under eller omedelbart efter att styrsystemet har slagits på. Om joysticken flyttas från sitt ursprungliga läge kan ett joystickfel uppstå.

Se till att joysticken är i utgångsläget och stäng sedan av och slå på rullstolen igen. Om detta inte fungerar och visas felkod, kontakta din återförsäljare.

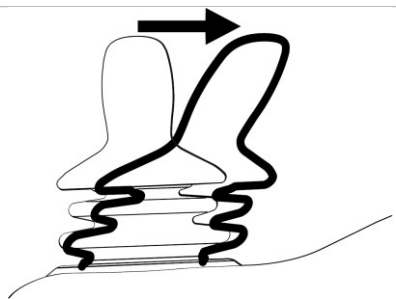

5.9 Litiumbatteri, laddare och laddning

Hur ofta du behöver ladda rullstolens batteri beror på en rad faktorer, bland annat hur du använder rullstolen, temperaturen och batteriernas ålder. Alla batterier förlorar gradvis sin kapacitet med tiden.

Den viktigaste faktorn för batteriernas livslängd är hur ofta de laddas eller laddas ur. Om batterispänningsindikatorn visar att batterierna förlorar ström snabbare än normalt kan batterierna vara utslitna och behöva bytas ut.

	OBSERVERA: Urladdade batterier Om batterierna är helt urladdade ska de laddas så snart som möjligt, eftersom helt urladdade batterier kan minska batteriets livslängd.
	OBS: Ladda batterierna var tredje månad Om batteriet inte kommer att användas på länge rekommenderas att ladda batteriet var tredje månad.

För att uppnå bästa livslängd, låt aldrig batterierna laddas ur helt. Ladda alltid batterierna omedelbart efter att de har laddats ur.

	WARNING: Risk för brand eller explosion – laddningsförhållanden Använd endast den laddare som medföljer din rullstol. Användning av andra laddare kan skada batterierna, rullstolens elektronik eller själva laddaren. Det kan också leda till till att delar överhettas, vilket kan medföra en ökad brandrisk.
	WARNING: Risk för brand eller explosion – kortslut inte Var försiktig när du använder metallföremål vid arbete med batterier. En kortslutning kan lätt orsaka en explosion. Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon.
	WARNING: Risk för överhettning, gnistor eller kortslutning För att avbryta laddningsprocessen, dra ut laddarens kontakt ur vägguttaget innan du drar ut laddningskontakten ur kontrollenhetens uttag, för att undvika gnistbildning och onödigt hög slitage på laddningskontakten. Laddaren kan bli varm och får inte täckas. Laddaren måste placeras så att den har fritt utrymme på alla sidor.

	
Ta bort litiumbatteriet från rullstolen	Installera litiumbatteriet

	INFORMATION ○ Batteriets volym beror på vilken rullstol du köper. ○ Kontakta din återförsäljare för att köpa ett batteri som passar dina individuella behov.
---	---

	
Använd endast laddaren som medföljer din rullstol.	Ladda via uttaget i kontrollenheten.

	OBSERVERA: Ladda batteriet ○ Se till att laddarens kontakt är helt isatt i uttaget i styrenheten. ○ Om strömmen till rullstolen slås på under laddningsprocessen måste den stängas av igen och laddaren kopplas bort innan rullstolen kan köras.
---	---

5.10 Övriga introduktioner

5.10.1 Justera ryggstödetets höjd

		
Lyft upp de två spakarna bakom ryggstödet.	Håll i handtaget för att höja eller sänka ryggstödetets rör till justera till höjd som passar dig.	Lås ryggstödetets rör efter justeringen.

	OBS Det är nödvändigt att operatören kontrollerar att handtaget är låst.
---	---

5.10.2 Rygg- och sittklädsel



Ryggdynan fästs med kardborreband, vilket gör den enkel att ta av och sätta på.



Ryggremmen fästs med kardborreband, vilket är enkelt att ta isär och sätta ihop.



Sittdynan fästs med kardborreband, vilket är lätt att ta bort och sätta tillbaka.



Sätesremmen fästs med kardborreband, vilket är lätt att ta isär och sätta ihop.

5.10.3 Borstad motor och elektromagnetisk broms



Vänster motor



Höger motor


Drivenheten består av en elmotor med växellåda och elektromagnetisk broms.




VARNING

Elektromagnetiska bromsar fungerar endast när rullstolen är i körläge, drivhjulet hjulet är låst. Användaren måste kliva ur rullstolen när den är i handdrivet läge eller manuellt läge.

Rullstolen är utrustad med två elektromagnetiska bromsar som endast fungerar när rullstolen är i körläge.

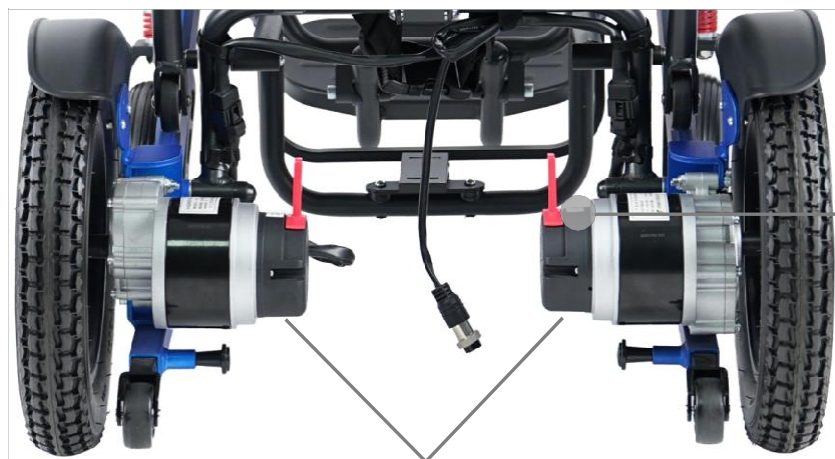

Elektromagnetiska bromsar

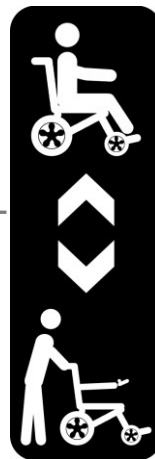

Körläge

Handdrivet läge



FARA

Aktivera alltid de elektromagnetiska bromsarna efter att rullstolen har skjutits manuellt. särskilt på ojämna ytor och sluttningar.

5.10.4 Positioneringsbälte




INFORMATION

Rullstolen är inte utrustad med bälte, användaren köper enligt individuella behov. Var noga med att köpa ett tvåpunktsbälte. Se följande för information om hur du installerar det.

6 Styrenhet

6.1 Styrenhet (SY-D)

6.1.1 Kontrollpanel

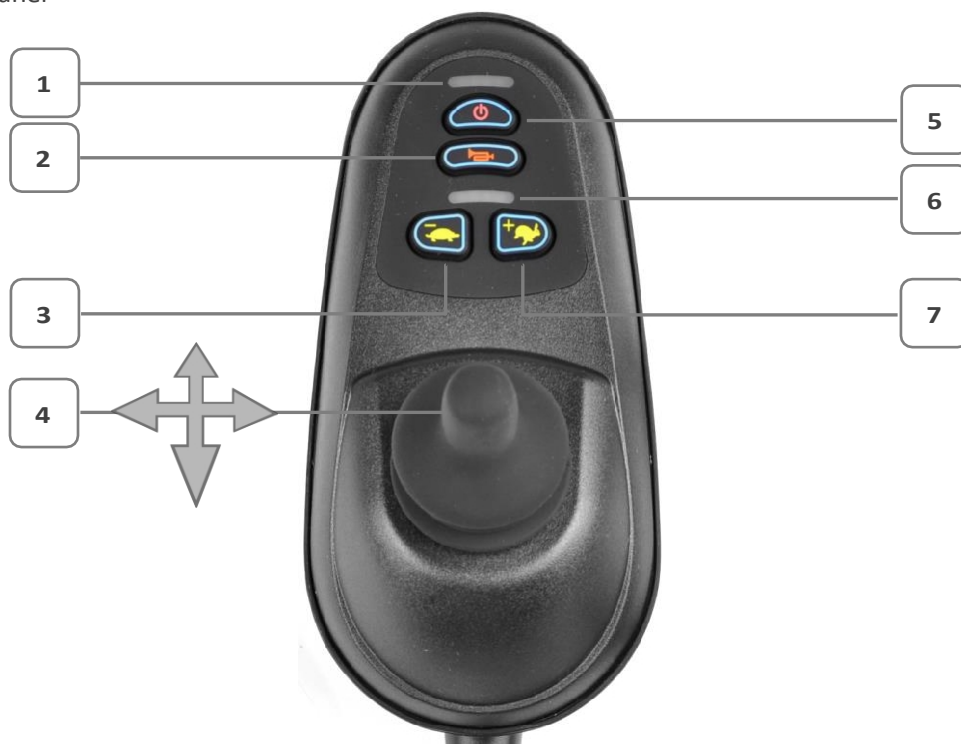


Kod	Namn på huvudkomponenter	Kod	Namn på huvudkomponenter
1	Batteriindikator	5	Strömbrytare På eller av
2	Signalknapp	6	Hastighetsindikator
3	Minska maximal hastighet	7	Öka maximal hastighet
4	Joystick		
○ Översiktsskilderna visar kontrollenhetens grundläggande funktioner. ○ Laddningsuttaget sitter på kontrollenhetens framsida och får endast användas för laddning. Anslutning av andra elektriska apparater kan skada kontroll systemet eller påverka rullstolens EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) prestanda.			

7 Transport och förvaring rullstol

7.1 Transport och förvaring av rullstolen

Om du vill transportera eller förvara rullstolen rekommenderas att du först fäller ihop den, vilket underlättar transporten och tar mindre plats. Dess låga vikt och kompakta storlek gör den mycket lämplig för transport och förvaring.

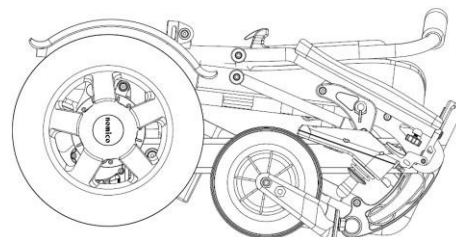

VARNING

Demonterade eller flyttbara delar (som styrenhet) måste antingen fästas på rullstolen eller tas bort från den och måste fästas ordentligt i fordonet under transporten. Detta för att förhindra att lösa delar eller delar som kan lossna orsakar skador på passagerarna under transporten.

7.2 Flygtransport

Flygbolag har olika regler för transport av rullstolar. Kontakta ditt flygbolag för mer information och för att säkerställa att rullstolen kan transporteras på ett säkert sätt.

8 Underhåll och reparationer

För att rullstolen ska fungera bra är det viktigt att den används korrekt och underhålls regelbundet. En väl underhållen rullstol håller längre och har mindre risk för defekter.



OBS

Vissa reparationer kan kräva andra verktyg än de som medföljer rullstolen.

**VARNING**

Stäng alltid av strömmen före underhåll och reparationer.

8.1 Underhålls- och inspektionsfrekvens

Vi rekommenderar att följande underhålls- och inspektionsschema följs.

Schema för underhåll och inspektion	Dagligt	Varje vecka	Månadsvis	Årligt
Kontrollera batterinivåindikatorn och ladda vid behov.	✗			
Kontrollera att styrenheten inte är skadad.	✗			
Se till att alla löstagbara delar är ordentligt fastsatta.	✗			
Kontrollera däckens och pumpa dem vid behov.		✗		
Om rullstolen är utrustad med lampor och reflexer, se till att de fungerar och är rena.		✗		
Rengör rullstolen och klädseln.			✗	
Kontrollera klädsel, sittdel och armstöd för slitage.			✗	
Kontrollera att bromsspaken fungerar som den ska.			✗	
Slutför inspektion, säkerhetskontroll och service utförd av en auktoriserad rullstolsåterförsäljare.				✗

8.2 Verktyg

Använd följande verktyg för underhåll och mindre reparationer. ⓘ

INFORMATION: Olika rullstolar kräver olika verktyg.

	Insexnycklar 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 10 mm		Hylsnyckel
---	---	--	------------

8.3 Rengöring

Regelbunden skötsel och underhåll förhindrar onödigt slitage och skador på din rullstol.

8.3.1 Metallytor

Tack vare den högkvalitativa pulverlackeringen eller flytande bakfärgen garanteras optimalt korrosionsskydd.

Använd helst en mjuk trasa eller svamp, vatten och ett mildt rengöringsmedel för normal rengöring. Torka noggrant med en trasa och vatten och torka sedan torrt.

8.3.2 Plast

För normal rengöring, tvätta plastytor med en mjuk trasa, mildt rengöringsmedel och vatten. Skölj noggrant och torka med en mjuk trasa. Använd inte lösningsmedel eller slipande köksrengöringsmedel.

8.3.3 Klädsel och tyg

För normal rengöring, tvätta klädseln med ljummet vatten och en mild, icke-slipande tvål. Använd en mjuk trasa eller borste. Torka bort eventuella vatten- eller tvålattenrester med en ren, torr trasa innan ytan torkar. Upprepa proceduren för att ta bort envis smuts eller fläckar. Bläckfläckar kan ibland avlägsnas genom att tvätta med tvål och vatten följt av isopropylalkohol.

9 Felsökning

9.1 Felsökningsguide

Följande felsökningsguide beskriver ett antal fel och händelser som kan uppstå när du använder rullstolen, tillsammans med föreslagna åtgärder. Observera att guiden inte kan beskriva alla problem och händelser som kan uppstå och att du alltid bör kontakta din återförsäljare.

Händelse	Möjlig orsak	Åtgärd
Rullstolen startar inte.	Batterierna är urladdade.	Ladda batterierna.
	Kabelanslutningen har lossnat.	Kontrollera alla anslutningar och anslut dem igen.
Rullstolen kan inte köras.	Batteriladdare ansluten.	Stoppa laddningen. Koppla bort den laddningskabeln från rullstolens laddningsuttag.
	Rullstolen är i handdriven läge.	Växla till körläge.
Rullstolen stannar medan den körs.	-kabeln -anslutningen har lossnat löst.	Kontrollera alla anslutningar och återanslut anslutningen.
Rullstolen kan inte laddas.	Kabelanslutningen har lossnat eller anslutningen misslyckades.	Kontrollera alla anslutningar och anslut igen.
	Batteriet är gammalt eller skadat.	Batteriet måste bytas ut.
	Laddaren är skadad.	Laddaren måste bytas ut.

9.2 Felsökningsguide för styrenhet (SY-D)

När felalarmet hörs från styrenheten och batteriindikatorlampan samtidigt blinkar, indikerar detta att den elektriska rullstolen är i onormalt skick. Betydelsen av felalarmtillståndet och rekommenderad åtgärd visas i tabellen nedan.

Felindikering	Kort beskrivning av fel eller fel	Åtgärd
---------------	-----------------------------------	--------

1 ring	Varning för underspänning	Batteriet är svagt, ladda det i tid. Om batteriet är fulladdat och larmet om underspänning fortfarande ljuder betyder det att styrenheten är defekt.
2 ringar	Vänster motor frångkopplad	Kontrollera att strömkabeln till den vänstra motorn är intakt och att kontakten är korrekt ansluten. Om problemet kvarstår, byt plats på den vänstra och högra motorn och anslut dem. Om det hörs fyra ringande ljud är det den vänstra motorn som är defekt. Om det hörs två ringande ljud är det styrenheten som är defekt larmringar.
3 ringar	Fel på vänster broms	Kontrollera om det vänstra motorhandtaget är inställt på körläge, att strömkabeln är intakt och att kontakten är ordentligt ansluten. Om problemet kvarstår, byt plats på vänster och höger motor och anslut dem. Om det hörs 5 ringningar betyder det att bromsen på vänster motor är defekt. Om det ljuder 3 ringningar betyder det att styrenheten är defekt.
4 ringar	Höger motor frångkopplad	Kontrollera att strömkabeln till höger motor är intakt och att kontakten är korrekt ansluten. Om problemet kvarstår, byt plats på vänster och höger motor och anslut dem. Om det hörs två ringande ljud är det höger motor som är defekt. Om det hörs fyra ringande ljud är det styrenheten som är defekt. det hörs fyra ringningar.
5 ringar	Fel på höger broms	Kontrollera om höger motorhandtag är inställt på körläge, att strömkabeln är intakt och att kontakten är korrekt ansluten. Om problemet kvarstår, byt plats på vänster och höger motor och anslut dem. Om det ljuder tre ringsignaler betyder det att höger motorbroms är defekt. betyder att styrenheten är defekt om det finns 5 ringlarm.
6 ringar	Överströmningsvarning	Stäng av strömmen och ställ motorn i körläge, tryck på rullstolen för att kontrollera om den kan skjutas smidigt. Om den inte kan skjutas normalt och med motstånd måste du koppla bort styrenheten och motorn. Om den fortfarande inte kan skjutas betyder det att motorn är kortsluten, vilket innebär att styrenheten är defekt om den kan skjutas lätt.
7 ringar	Joysticken är inte i utgångsläget	Stäng av strömmen, släpp joysticken tillbaka till utgångsläget och starta sedan om.
8 ringar	Fel på styrenheten	Vänligen kontakta kundtjänst.
9 ringar	Överbelastningsvarning	Stäng av strömmen och starta om, och se till att motorn inte har fastnat i främmande föremål eller terrängen.
10 ringar	Överspänningsvarning	Stäng av strömmen och koppla bort batterikabeln, anslut sedan igen. Om felet fortfarande uppstår, byt ut styrenheten eller batteriet.
11 ringar	Varning för överhettning	Stäng av strömmen och vänta tills enheterna har svalnat, slå sedan på dem igen och kontrollera om felet kvarstår. Om felet fortfarande kvarstår, vänligen bytes ut styrenheten.

	OBS Stäng av rullstolen och låt den stå i några minuter, starta sedan om rullstolen. Om felet kvarstår måste du stänga av rullstolen och kontakta din återförsäljare. Skriv ner informationen som visas på styrenhetens display och vidarebefordra den till din återförsäljare.
	VARNING Använd inte rullstolen förrän problemet har åtgärdats eller du har fått andra instruktioner från din serviceleverantör.

10 Begränsad garanti


Garanti	Garantiperiod	Garantiartiklar	Garantiperiod
Aluminiumram	24 månader	Borstad styrenhet	12 månader
Borstad motor	12 månader	Laddare	12 månader
Litiumbatteri	12 månader	Icke-hållbara delar	6 månader

- (1) Icke-hållbara delar omfattar följande artiklar: däck och slangar för fram- eller bakhjul, sittdyna, rygg- och sittremmar, ryggklädsel, armstödsuddar, handtag, plastdelar etc.
- (2) Denna garanti täcker inte: skador som uppstår till följd av normalt slitage eller andra omständigheter utanför vår kontroll.
- (3) Ovanstående garanti gäller inte om:
 - Den ursprungliga etiketten som visar tillverkningsdatum eller batchnummer har tagits bort, ändrats eller förstörts.
 - Rullstolen har utsatts för vårdslöshet, olycka, felaktigt underhåll eller förvaring, felaktig användning eller missbruk.
 - Rullstolen har skadats genom felaktiga reparationer eller har modifierats.
 - Eller gratisgåvor.
- (4) Efter att garantin har löpt ut debiteras kostnader för reservdelar, arbete och frakt.
- (5) Hållbarheten eller livslängden för rullstolarna och deras komponenter kan variera beroende på användningsfrekvensen eller andra faktorer.
- (6) Denna garanti är begränsad till den första användaren och kan inte överlåtas.

12 Symbolernas betydelse

Symbol	Introduktion	Symbol	Introduktion
	UKCA-märket		Namn och adress till ansvarig person i Storbritannien
	Tillverkare Namn och adress		Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen.
	Batchnummer		Tillverkningsdatum
	Används till år och månad (utgångsdatum/bäst före-datum)		Serienummer
	Varningar och försiktighetsåtgärder		Referensnummer
	Håll borta från solljus		Förvaras torrt
	CE-märkning		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen/unionen
	Ömtåligt, hantera varsamt		Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen
	Medicinteknisk produkt		Unik produktidentifierare
	Importör		Distributör

	Tillverkarinformation Företag: SUZHOU IDEAL MEDICAL CO., LTD. Adress: No.88 Huachi Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou (215000), Jiangsu, Kina.
	Ansvarig person i Storbritannien Företag: SUNGO Certification Company Limited Adress: 3rd floor, 70 Gracechurch Street, London. EC3V 0HR
	Europeisk representant: SUNGO Europe B.V. Adress: Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Nederländerna.

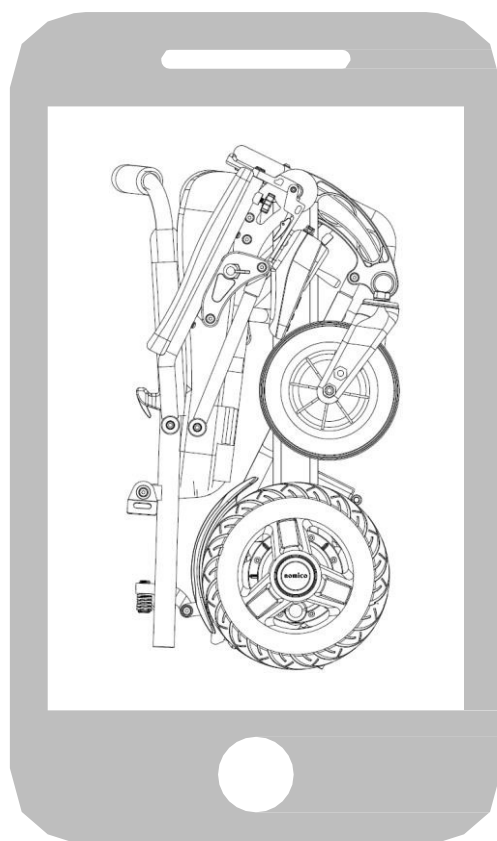

BLIMO



www.blimo.se



www.blimo.dk



www.blimo.no



www.blimo.fi

NORDBUTIKER AB Tel:
+46-812350720
info@blimo.se/dk/no/fi
www.blimo.se/dk/no/fi

Gösvägen 28
76141 Norrtälje,
Sverige